



מערכת אחת, שלושה גוונים:
פתרון זרימתי פשוט לכל
סוגי החללים



Solventum™ Filtek™ Easy Match Flowable Restorative

- ✓ בחירת גוון אינטואיטיבית
- ✓ לכל סוגי החללים
- ✓ אטימות אדפטיבית טבעית
- ✓ כמעט ללא בועות

פשוט וקל

עם שלושה גוונים בלבד – בהיר, טבעי וחמים,
Solventum™ Filtek™ Easy Match Flowable
Restorative מפשט את בחירת הגוון: פשוט צריך
להתבונן ולהתאים אינטואיטיבית.


הודות לאטימות אדפטיבית טבעית, הפתרון שלנו
מספק שקיפות דמוית אמיל בשיפוע ובקצה האינסיזלי,
ואטימות דמוית דנטין בכל מקום אחר, והכול ללא בלוקה.



- כמעט ללא בועות או זליגה של חומר
- בחירת גוון פשוטה ואינטואיטיבית לשחזורים קדמיים ואחוריים
- מלאי יעיל מסייע להפחית בזבוז של גוונים שאינם בשימוש תדיר.

התוויות לשימוש

(אינקרמנטים של עד 2 מ"מ)

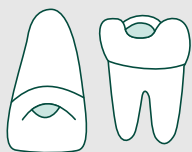


קלאס 1



קלאס 2



קלאס 3

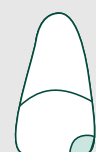

קלאס 4



קלאס 5



בסיס



מצע



תיקון של שחזורים לא ישירים



תיקון 1



איטום חריצים וחרצים


1 תיקון של שחזורים זמניים העשויים מרזין ואקריל.

עיינו בהוראות השימוש לקבלת רשימה מלאה של התוויות.

כולל אטימות אדפטיבית טבעית

מאפשר שקיפות דמוית אמיל היכן שצריך, ואטימות דנטין בכל מקום אחר – ללא צורך בבלוקר.

השוואה של קומפוזיט משחתי

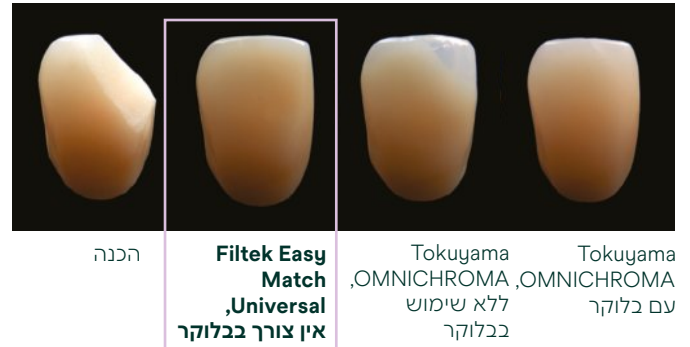


מקור הקומפוזיט הנוזלי: נתונים פנימיים של Tokuyama OMNICHROMA FLOW #121E04, Tokuyama OMNICHROMA #142A35, Solventum™ Filtek™ Easy Match: #10777361 חומר השחזור הנוזלי.

מקור משחה: נתונים פנימיים של Tokuyama OMNICHROMA #002EY8, #098E53 מספר Solventum™ Filtek™ Easy Match Universal Restorative; #NE57998, #9533695 מספר.

Solventum™ Filtek™ Easy Match Flowable - 3M™ Filtek™ Easy Match Universal Restorative

מציגים את אותן דרגות שקיפות משתנות המותנות בעובי הקומפוזיט, ועולות בביצוען על מערכות של גוון יחיד, גם בקומפוזיט נוזלי וגם במשחתי

עובי הקומפוזיט נמצא בקורלציה עם הווליום

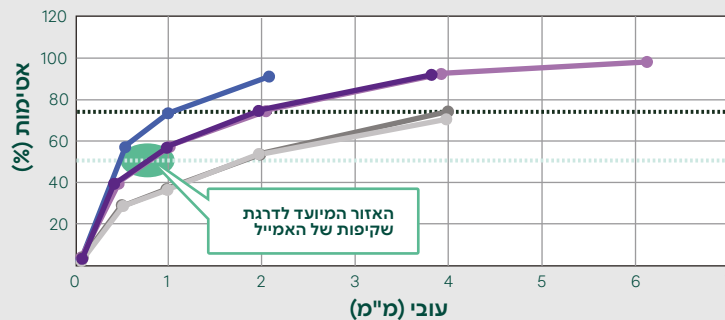

ווליום דנטין

3M™ Filtek™ Easy Match Universal Restorative מציג אטימות דמוית דנטין בעוביים של <2 מ"מ

ווליום אמייל

3M™ Filtek™ Easy Match Universal Restorative מציג שקיפות דמוית אמייל בעוביים של 0.5-1 מ"מ

3M™ Filtek™ Supreme Ultra Universal חומר השחזור | דנטין | 3M™ Filtek™ Easy Match Universal חומר השחזור | טבעי | Solventum™ Filtek™ Easy Match Flowable חומר השחזור | טבעי | OMNICHROMA® TOKUYAMA מביט (ללא שימוש בבלוקר) | OMNICHROMA FLOW TOKUYAMA מביט

מקור: נתונים פנימיים של Solventum

כיצד החומר עובד? בעזרת העוצמה של אטימות טבעית.

בניגוד למערכות אחרות בעלות גוון יחיד, הקומפוזיט Filtek Easy Match, משחתי ונוזלי, אינו זקוק לבלוקר כדי להסוות את כהות חלל הפה בשחזורים קדמיים. האטימות הטבעית שלו מספקת שקיפות דמוית אמייל בעוביים של 0.5 עד 1 מ"מ, בדיוק היכן שצריך אותה לשיפוע ולקצה האינסזלי. בעוביים של 2 מ"מ ומעלה החומר מספק אטימות דמוית דנטין.

כל הקומפוזיטים נהיים שקופים יותר כשמורחים אותם בשכבות דקות יותר. אבל האטימות האדפטיבית הטבעית של חומרי השחזור Filtek Easy Match מתאימה בצורה אופטימלית עם הדנטין ועם האמייל, וזה עוזר להתמזג עם מבנה השן שמסביב ולספק מראה טבעי.

בחירת גוון אינטואיטיבית

כרומה, או עוצמת צבע, היא רק אחד המרכיבים שמובילים להתאמת גוון נהדרת. אפילו קומפוזיט ב'צבע הנכון' יכול לכלוס מהשיניים שסביבו אם דרגת בהירותו או אטימותו אינם תואמים בצורה טובה.

יחד, שלושת גוני הקומפוזיט Filtek™ Easy Match מכסים את גוני VITA הקלאסיים ללא צורך בבלוקה.



יתרונות עיקריים שתאהבו בשניהם:

- בחירת גוון מהירה ואינטואיטיבית.
- עוצמה של אטימות אדפטיבית טבעית; אין צורך בבלוקר
- שלושה גוונים בלבד מספקים התאמה מצוינת לחיוכים של מרבית המטופלים
- מלאי יעיל מסייע להפחית בזבז של גוונים שאינם בשימוש תדיר
- חומרי השחזור הנוזלי והאוניברסלי של Filtek בטוחים לחימום^{1,2}

1 יש לחמם את הקפסולות לטמפרטורה של עד 70°C/158°F למשך של עד שעה.
2 יש לחמם מזרקים עם קומפוזיט נוזלי לטמפרטורה של עד 70°C (158°F) למשך של עד שעה, עד 25 פעמים.

חיוך בהיר



דוגמה מייצגת לגוון שיניים בהיר



בהיר: כרומה נמוכה, ווליו גבוה

חיוך טבעי



דוגמה מייצגת לגוון שיניים טבעי.



טבעי: כרומה ווליו מאוזנים בטווח ממוצע

חיוך חמים



דוגמה מייצגת לגוון שיניים חמים.



חם: כרומה גבוהה, ווליו נמוך

כמעט ללא בועות או זליגה של החומר

עם קומפוזיטים נוזליים רבים, עלולות להיווצר בועות במהלך פעולת ההוצאה. חומר השחזור הנוזלי Filtek Easy Match מאפשר שליטה טובה יותר ומיועד למנוע הופעת בועות או זליגה של החומר

זה עובד הודות לעיצוב פנימי שממזער מערבולות ולכידת אוויר בשתי דרכים:


1. עיצוב המזרק

בשל תעלה שתוכננה במיוחד בבוכנה, האוויר יכול לצאת מן המזרק במהלך תהליך המילוי במפעלי הייצור של Solventum, הדבר מונע מהאוויר להילכד בתוך המזרק, מצב שעלול לגרום להיווצרות בועות ולזרימה מתמשכת




2. עיצוב הטיפ

הודות לדופן הפנימית החלקה המדורגת של הטיפ, שתואמת לזווית המדורגת של המזרק, החומר יכול לזרום דרך הטיפ החדשני ללא לכידה של אוויר.

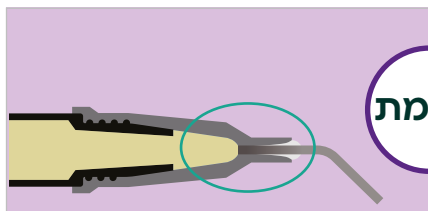

לעומת


העיצוב הפנימי החלק של טיפ המזרק של Solventum מסייע במניעה של לכידת אוויר.

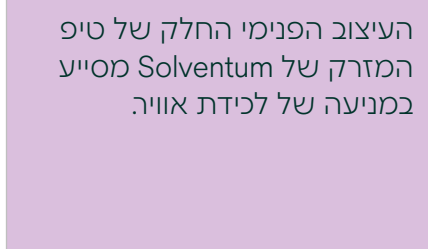

Solventum™ Filtek™ Easy Match Flowable Restorative




Tokuyama Estelite Universal Flow Super Low

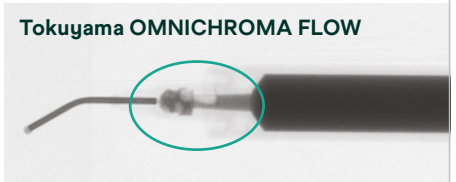

Tokuyama OMNICHROMA FLOW




VOCO GrandioSO Heavy Flow

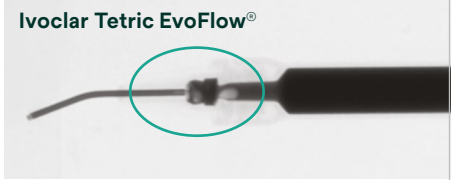

Ivoclar Tetric EvoFlow®



Dentsply Sirona TPH Spectra® ST Flow

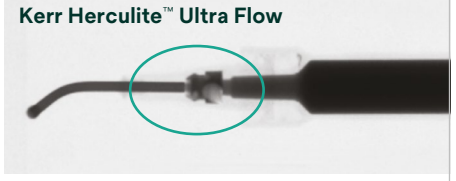

Kerr Herculite™ Ultra Flow

מקור: נתונים פנימיים של Solventum. מנות של חומר השחזור הנוזלי Filtek™ Easy Match Solventum™ מספר 11475951, 1096960 ו-11529040. מנות של Tokuyama ESTELITE UNIVERSAL FLOW Super Low מספר 088E44 ו-077E94; מנות של Tokuyama OMNICHROMA FLOW מספר 121E04 ו-077E94; מנות מספר 2445600 ו-2449208; Ivoclar® Tetric EvoFlow מספר Z07KP7 ו-Z07CRP, N010227; מנות Dentsply Sirona TPH Spectra® מספר A193331. VOCO GrandioSO Heavy Flow מספר 2411000095 ו-2410000535; Kerr Herculite™ Ultra Flow מספר 2411000095 ו-2410000535.

Solventum™ Filtek™ Easy Match Flowable Restorative



מק"ט	תיאור
בהיר	
6325B	(2) מזרקים, 2 גרם בכל אחד (1) שקית של 20 טיפים בכל אחת
טבעי	
6325N	(2) מזרקים, 2 גרם בכל אחד (1) שקית של 20 טיפים בכל אחת
חמים	
6325W	(2) מזרקים, 2 גרם בכל אחד (1) שקית של 20 טיפים בכל אחת
קיט היכרות	
6325K	(3) מזרקים, 2 גרם בכל אחד: 1 מכל גוון: בהיר, טבעי וחם (2) שקיות של 20 טיפים בכל אחת

3M™ Filtek™ Easy Match Universal Restorative



מק"ט	תיאור
בהיר	
6310B	(20) קפסולות, 0.2 גרם בכל אחת
6320B	(1) מזרק, 4 גרם בכל אחד
טבעי	
6310N	(20) קפסולות, 0.2 גרם בכל אחת
6320N	(1) מזרק, 4 גרם בכל אחד
חמים	
6310W	(20) קפסולות, 0.2 גרם בכל אחת
6320W	(1) מזרק, 4 גרם בכל אחד
קיט היכרות	
6310K	(60) קפסולות, 0.2 גרם בכל אחת: 20 מכל גוון: בהיר, טבעי וחם
6320K	(3) מזרקים, 4 גרם בכל אחד: 1 מכל גוון: בהיר, טבעי וחם



SOLVENTUM TECHNOLOGIES ISRAEL LTD

Hatidhar St. 5, A-Tower
Industrial Area, Raanana 4366507
P.O. Box 4144
Israel
Tel: +972-73-263-8598
www.solventum.com

© Solventum 2025. Solventum, the S logo and other trademarks are trademarks of Solventum or its affiliates. 3M, the 3M logo and other 3M owned and/or licensed trademarks are trademarks of 3M Company. Other trademarks are the property of their respective owners. OMG2033955,